



Seaweex[®]
Beauty Concept

Seaweex[®]
CRYO LIPO



Seaweex[®]
Cryo Lipo 360°



Absolutna Nowość na rynku!

Hit! Nieinwazyjna metoda wspomagająca redukcję tkanki tłuszczowej!

Seaweex[®]
CRYO LIPO


Seaweex[®] Cryo Lipo to najnowsza technologia zamrażania tkanki tłuszczowej, wykorzystująca innowacyjną głowicę, działającą w zakresie kąta 360°, która zapewnia całkowite chłodzenie jej wewnętrznej powierzchni na całym obszarze.

Wielkie odkrycie! Przełom w usuwaniu komórek tłuszczowych. Metoda zamrażania tkanki tłuszczowej została odkryta na Uniwersytecie Harvarda przez D. Mansteina (M.D., Ph.D.) i M. Andersona (MD), kiedy nieoczekiwanie odkryli, że komórki tłuszczowe w ludzkim ciele mogą zostać zamrożone i bezpiecznie wydalone z organizmu przez układ limfatyczny. Obecnie kriolipoliza stała się jedną z najpopularniejszych metod redukcji tkanki tłuszczowej, ponieważ jest niechirurgiczna, nieinwazyjna i umożliwia powrót do codziennych czynności bezpośrednio po zabiegu.

Badania wykazały, że zamrażanie tłuszczu może zredukować komórki tłuszczowe o 22% podczas jednej sesji zabiegowej.

Zabieg kriolipolizy polega na silnym zamrażaniu komórek tkanki tłuszczowej przy pomocy urządzenia Seaweex[®] Cryo Lipo. Metoda ta idealnie się sprawdza przy miejscowej redukcji tkanki tłuszczowej, w szczególności w miejscach odpornych pomimo zmiany diety i ćwiczeń. Skutecznie zamraża, niszczy i trwale eliminuje komórki tłuszczowe pod skórą bez uszkodzenia otaczających ją warstw. Niska temperatura oddziałuje na komórki tłuszczowe, które ulegają rozpadowi, czyli lipolizie i są wydalone w naturalnych procesach metabolicznych. Na skutek działania niskiej temperatury lipidy krystalizują się a następnie są uwalniane z komórek tłuszczowych i transportowane przez układ limfatyczny. Wynikiem tego, jest widoczna redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej.

Najnowsza technologia kriolipolizy Cryo Lipo 360°, wykorzystuje głowice pracujące w zakresie kąta 360°! Skutecznie zamraża, niszczy i trwale eliminuje komórki tłuszczowe bez uszkodzania skóry.

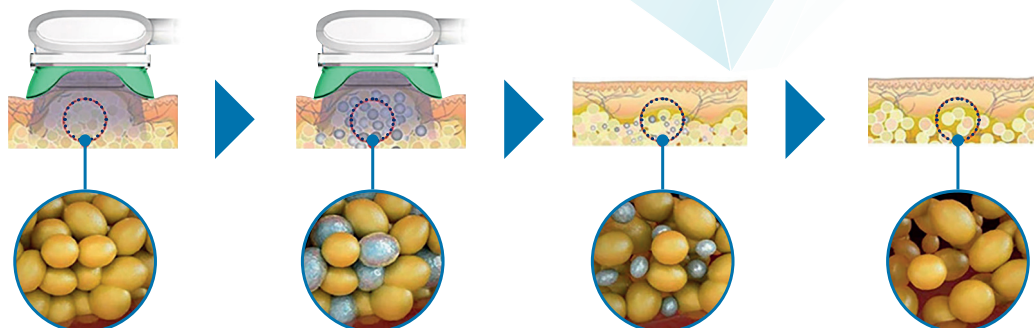

Zalety Seaweex® Cryo Lipo:

- innowacyjne aplikatory chłodzą całą swoją powierzchnią 360°
- 3 rozmiary głowic: duża, średnia i mała
- zabieg **Seaweex® Cryo Lipo** jest 3 razy bardziej skuteczny, niż w przypadku innych urządzeń
- krótki czas zabiegu od 35 do 45 minut
- rezultaty widoczne już po pierwszym zabiegu (najlepszy efekt po około 3 tygodniach)
- nawet 30-40% ubytku tkanki tłuszczowej
- głowice są wyposażone w ekran dotykowy oraz wymienne, miękkie, silikonowe nakładki, które idealnie dopasują głowice do wybranych partii ciała
- 4 technologie w jednym urządzeniu
- możliwość łączenia zabiegów
- możliwość użycia dwóch głowic zabiegowych jednocześnie, co znacznie skraca czas zabiegu
- urządzenie posiada moduł zabezpieczający przed zmrożeniem i automatyczne termostaty
- **Seaweex® Cryo Lipo** wyposażony został w specjalny system przemiennego chłodzenia i podgrzewania tkanki tłuszczowej (od -10°C do +45°C), co ułatwia usuwanie toksyn z organizmu
- zabieg bezpieczny i nieinwazyjny
- brak okresu rekonwalescencji i natychmiastowy powrót do codziennych czynności



Urządzenie **Seaweex® Cryo Lipo** posiada 5 zintegrowanych funkcji do wyszczuplania i kształtowania sylwetki:

- Kriolipoliza – 3 głowice z technologią 360°
- RF fale radiowe multipolarne na ciało
- RF fale radiowe multipolarne na twarz
- Liposukcja kawitacyjna
- Lipolaser

RF fale radiowe multipolarne

Urządzenie emituje fale radiowe RF wytwarzane przez prąd o wysokiej częstotliwości. Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagnetyczną, następnie dociera ona do tkanek, gdzie następuje ich podgrzanie, czyli zjawisko diatermii. Włókna kolagenowe zostają podgrzane, co wywołuje ich obkurczenie i napięcie, dzięki czemu następuje proces regeneracji. Fale radiowe stymulują fibroblasty do odbudowy i wytwarzania kolagenu oraz elastyny w skórze, dając efekt zwiększonego napięcia i gęstości skóry oraz poprawy jej elastyczności. W tkance podskórnej natomiast następuje obkurczenie komórek tłuszczowych, co prowadzi do ich redukcji.

Ponadto fale radiowe stymulują tkanki powierzchowne i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocykulację. Zwiększają pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach. Działają wspomagająco w redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz wymodelowania sylwetki i poprawy napięcia skóry.



Liposukcja kawitacyjna

Liposukcja kawitacyjna to nowoczesny, bezpieczny i zupełnie nieinwazyjny sposób redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z organizmu. Polega ona na rozbijaniu błony komórkowej komórek tłuszczowych za pomocą ultradźwięków. Podczas zabiegu zachodzi zjawisko kawitacji, czyli implozji komórek. Częsteczkę w tkankach wpadają w drgania powodując wewnątrz tkankowy masaż. Wytworzona w ten sposób energia trwale uszkadza błony komórek tłuszczowych i uwalnia wolne kwasy tłuszczowe oraz glicerol do przestrzeni międzykomórkowej. Uwolnione w ten sposób tłuszcze są transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianom materii. Ultradźwięki niskiej częstotliwości działają na bardzo głębokie warstwy tkanek, dzięki czemu mają świetny wpływ na cały organizm. Dodatkową zaletą zabiegu liposukcji kawitacyjnej jest wspomaganie redukcji cellulitu, usprawnienie przepływu limfy, przyspieszenie przemiany materii oraz stymulowanie układu krążenia.



Lipolaser

Lipolaser to zimny laser diodowy klasy 3D, który działa na zasadzie biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych za pomocą światła czerwonego o długości 650 nm. Światło to przenika w głębokie warstwy skóry i kieruje się na komórki tłuszczowe. Dochodzi w ten sposób do naturalnej reakcji chemicznej. Trójglicerydy rozpadają się na kwasy tłuszczowe i glicerol, które przekazywane są do układu limfatycznego, a następnie metabolizowane czyli usuwane naturalną drogą z organizmu. Lipolaser działa wyłącznie na komórki tłuszczowe, nie uszkodzając sąsiednich tkanek i naczyń krwionośnych. Urządzenie nie niszczy błony komórek tłuszczowych, a jedynie redukuje w sposób znaczny i kontrolowany ich zawartość i objętość. Bardzo dużą zaletą urządzenia jest to, że można go stosować na te partie ciała, w których zgromadził się nadmiar tkanki tłuszczowej trudnej do zredukowania dietą i ćwiczeniami. Zabieg jest bezbolesny, nieinwazyjny i nie pozostawia żadnych śladów na skórze. Można go z powodzeniem wykonywać w okresie letnim. Po serii zabiegów skóra ulega ujędrnieniu, dochodzi do bezpiecznej redukcji tkanki tłuszczowej.



czas zabiegu
od 35 do 45
minut



30-40%
ubytku tkanki
tłuszczowej



3 głowice
z technologią
360°




zabieg
Seaweex®
Cryo Lipo jest
3 razy bardziej
skuteczny



Urządzenie **Seaweex® Cryo Lipo 360°** posiada 3 głowice do kriolipolizy o różnych rozmiarach. Głowice są wyposażone w ekran dotykowy oraz wymienne, miękkie, silikonowe nakładki, które idealnie dopasowują się do wybranych partii ciała.

Przód

Tył

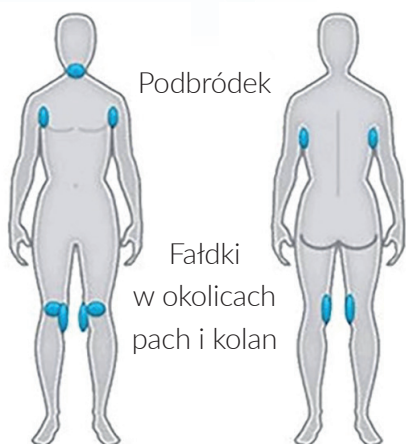

Mini głowica
Cryo



Rozmiar głowicy
80x45mm

- głowica idealna do mniejszych wypukłości
- bezpiecznie dociera w delikatne i trudno dostępne miejsca
- 35 minutowy cykl, efekty już po 1-2 zabiegach
- efekt gładkiego, wyprofilowanego, młodego podbródka
- bez zastrzyków, operacji i inwazyjnej liposukcji



FreezeCurve

- głęboka i zakrzywiona konstrukcja nakładki pozwala na lepsze dopasowanie głowicy do nieregularnych i wąskich części ciała
- idealna do tzw. „boczków”



FreezeCore

- najlepiej dopasowuje się do konturu brzucha
- najczęściej używana głowica w tym obszarze



FreezeFit

- nakładka idealna do dużych, pionowych obszarów tj. wewnętrzna i zewnętrzna strona ud oraz boki brzucha
- zalecana również do ramion



Duża
głowica Cryo



Średnia
głowica Cryo

Efekty działania **Seaweex® Cryo Lipo:**

- wyraźna redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej
- wygładzenie cellulitu i ujędrnienie skóry
- stymulacja przemiany materii w komórkach
- modelowanie sylwetki
- poprawa napięcia zwiotczanej skóry
- przyspieszenie metabolizmu
- poprawa krążenia krwi

Kupując urządzenie **Seaweex® Cryo Lipo** otrzymasz:

- bazę główną z ekranem dotykowym
- 3 głowice do kriolipolizy z dotykowym ekranem
- 7 silikonowych nakładek do kriolipolizy o różnej wielkości
- głowicę do liposukcji kawitacyjnej 40KHz
- pady do lipolaseru 8 szt
- głowicę RF do ciała 1 szt
- głowicę RF do twarzy 1 szt
- uchwyt na akcesoria 1 zestaw
- materiały marketingowe i szkoleniowe

Szkolenia i wsparcie

Zależy nam aby wspólnie z naszymi gabinetami partnerskimi, odnosić sukces. Dlatego oferujemy bezpłatne, profesjonalne szkolenia, ukończone certyfikatem oraz wsparcie marketingowe i serwis. Nasza technologia jest łatwa w użyciu, a nasz program szkoleniowy zapewni, że poczujesz się pewnie w wykonywaniu zabiegów i zyskasz szerokie grono zadowolonych klientów.



Dane techniczne:

- Napięcie: AC220V $\pm$ 10%, 50 Hz
- AC110V $\pm$ 10% 60 HZ
- Moc znamionowa: 800 W.
- Podciśnienie: 0-80Kp
- Chłodzenie: -10°C / +45°C
- Moc lasera: 100 mw/szt
- Częstotliwość kawitacji: 40 Khz
- Częstotliwość RF: 5 MHz
- Ilość Krio: 3 szt
- Metoda chłodzenia urządzenia: woda
- Wilgotność względna: $\leq$ 80%
- Ekran dotykowy: 8 cali
- Rozmiar maszyny: 63x55x96 cm
- Rozmiar opakowania: 64x43x64 cm
- Ciężar: 40kg

Cena katalogowa

18 000,00 zł netto

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEJ
OFERTY RATALNEJ LUB
LEASINGOWEJ



SeaweeX[®]
Beauty Concept

SeaweeX[®] Beauty Concept

Al. Witosa 31 lok. 21 c, 00-710 Warszawa
Mobile: +48 660 449 190, tel./fax. +48 22 858 35 12
www.seaweeex.pl, info@seaweeex.pl

